

Flexi ADM

Unsere neue Matratze für den Einsatz bei Querschnittslähmung und für die Dekubitus-Prophylaxe



Formgebend für den Komfort

- Versuchen Sie es mit einem FLEX-ADM Anti-Dekubitus-Matratzensystem, bevor Sie sich ein teures Wechseldrucksystem anschaffen.
- Die Erfahrungen und Feedbacks von Sr./Pfl . und Berechnungen im Verwaltungsbereich der letzten Jahre haben uns gezeigt, dass ein Einsparungspotential von Wechseldrucksystemen von 60 – 80% vorhanden ist!
- Überzeugen Sie sich selbst. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin mit einem unserer sehr kompetenten Außendienstmitarbeitern, die Sie gerne persönlich betreuen und auf unsere hochwertigen Produkte einschulen werden!

Drei Schichten für optimale Lagerung:


Die FLEX-ADM Matratze wurde mit einem Palliativteam speziell für Patienten entwickelt, die kaum mehr mobilisiert werden können. Aus-schlaggebend für die Entwicklung des FLEX-ADM Matratzensystems war der Wunsch, den Patienten über mehrere Stunden eine schmerz-freie Lagerung zu ermöglichen.

Die FLEX-ADM Matratze wurde aus ver-schiedenen Schichten und Qualitäten entwickelt für höchste Flexibilität in der Verwendung. Sie ist eine Kombination aus qualitativ hochwertiger Druckentlastung und konkurrenzlosem Komfort.



Sie können damit nach den Richtlinien der Kinästhetik lagern und durch Feinabstimmungen auf die individuellen Patientenbedürfnisse eingehen und anpassen. Mit der FLEX-ADM Matratze können sie die Oberfläche so gestalten, wie Sie und der Patient es als optimal und angenehm empfinden!

Die FLEX-ADM bietet eine Vielzahl von Lagerungsmöglichkeiten, mehr als mit herkömmlichen Anti-Dekubitus-Matratzen möglich sind. Mit wenigen Handgriffen und durch Mikrolagerungen können Lageveränderungen spielend einfach durchgeführt werden.

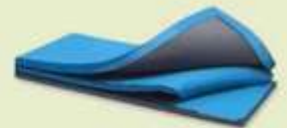

Durch die zu öffnenden Reißverschlüsse des Mittelteiles der Matratze, kann diese auf viele unterschiedliche Arten verändert werden. Durch Rollen oder Umlegen der zweiten Schaumstoffschicht, wird dieser ermöglicht, sich an den Körper anzupassen.



Durch Kombination oder Einschieben der unterschiedlich großen FLEX-ADM Keile, oder das Einrollen und/oder Einschlagen des mittleren Teiles der Matratze, können am unteren Ende z.B. eine Fersenfreilagerung, in der Mitte durch Einrollen eine bauchentspannende Lagerung oder an den Seiten z.B. eine 30° Seitenlagerung durchgeführt werden.


Durch die FLEX-ADM Keile können unterschiedliche Neigungen erzielt werden, auch wenn sie zwischen der oberen oder unteren Matratzen-schicht verwendet werden.



Die verwendete Kombination der einzelnen Schichten und der verschiedenen Schaumqualitäten machen die FLEX-ADM Matratze zu einem effektiven und hochkomfortablen, druckreduzierenden Anti-Dekubitus-system, ohne dabei die Grundform der Matratze zu verändern. Die Scherkräfte durch Lagerungshilfsmittel am Patienten sind somit stark vermindert.

Als Auflagefläche wird eine Schicht mit viskoelastischem Schaumstoff eingesetzt, die eine wesentliche Rolle bei der gleichmäßigen Druck-vertei-lung spielt. Die FLEX-ADM Matratze eignet sich daher besonders für Patienten mit hohem Dekubitusrisiko.

Aufgrund des Schichtaufbaues und den vielen Bauelementen ist nun eine individuelle Patientenlagerung bis 185 kg möglich.

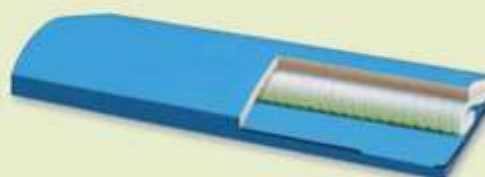

Die FLEX-ADM Matratze kann sowohl in der Kranken- als auch in der Altenpflege und der Palliativmedizin verwendet werden.

Das Anti-Dekubitus Matratzensystem mit dem Unterschied

Einsatzgebiet

FLEXI ist eine sehr vielseitige Matratze, passend für alle Pflegebereiche, ideal für Altenheime und palliative Pflege. Das erfinderische Design erlaubt totalen Freiraum in der Lagerung.

Zusammensetzung

- 15cm **Kern** besteht aus 3 einzelnen Schichten:
FLEXI Prima : 3 CMHR Kaltschäume miteinander kombiniert
Die austauschbaren Schichten werden durch einen Reißverschluss verbunden.
- 2 **Keile** :
FLEXI großer Keil: 508 X 635 X 213/5 mm
FLEXI kleiner Keil: 277X 635 X 105/5 mm
- Anti-Rutschcoating für jede Schicht mit einer luftdurchlässigen PU Oberschicht.



Produktnutzen

- Es ist nicht nötig die Matratze auszuwechseln : nach einigen einfachen Anpassungen verwandelt sich die Matratze entsprechend der Lagerungsbedürfnisse des Patienten.
- Mit anderen anti-dekubitus Matratzen verglichen ist der Heilungserfolg viel besser.
- Optimale Druckverteilung.
- Die Details der unabhängigen Studie und die dazugehörigen Druckresultate bekommen Sie gerne von uns.



Reinigung


- Einfach mit pH-neutralen Waschmitteln säubern.
- Wischdesinfektion nach RKI.

Abmessung

- Kundenindividuelle Fertigung auf Anfrage.

Anti-Dekubitus-Matratze

Flexi-ADM

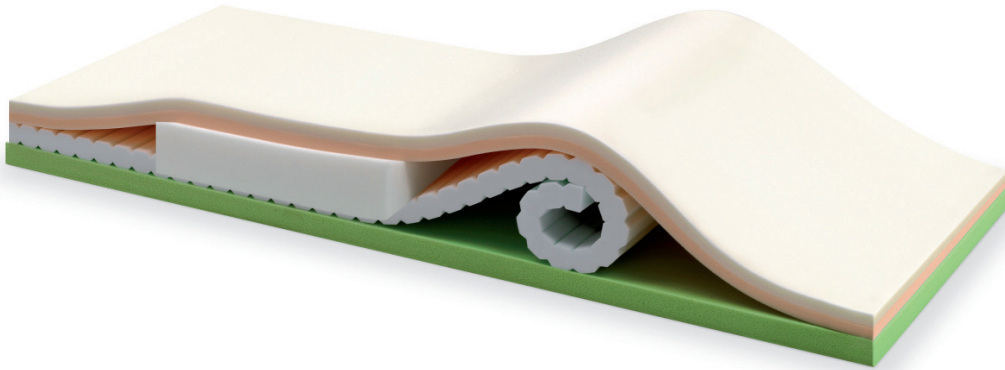

Einsatzgebiet

Flexi ist ein hochwertiges, langlebiges und Druck reduzierendes Anti-Dekubitus-System, ideal für alle Pflegebereiche in Krankenhäusern, in der Palliativpflege, in Reha-Zentren, Alten- und Pflegeheimen sowie im Homecare-Bereich.

Mit der Flexi-Matratze kann man nach dem neuestem Wissensstand der Pflege verschiedenste Lagerungstechniken fast ohne Hilfsmittel durchführen.

Patientengewicht

max. 185 kg

System besteht aus

- 3 Matratzenteile zu je 50 mm
- 2 unterschiedlich großen Lagerungskeilen

Besondere Produktmerkmale

- geeignet für Patienten mit hohem Dekubitusrisiko (Dekubitusgrad 1–4)
- Spitzendruck-reduzierend durch optimale Druckverteilung der viscoelastischen Oberfläche
- das 5-teilige Design erlaubt mit wenigen Handgriffen, durch Falten/Rollen totale Flexibilität und Freiraum in der Lagerung
- flexible Anpassung an die Bedürfnisse des Patienten und an jedes Pflegebett
- 4 kombinierte Schaumstoffschichten für ein generelles Wohlbefinden und besten Komfort
- Einsparungspotential von Wechseldrucksystemen
- leichte Reinigung (Bezug wasch- und abwischbar)
- für Allergiker geeignet

Technische Daten

Matratzenaufbau

- viscoelastischer Schaum
- Kaltschaum
- Normalschaum

PU-Bezug

- Oberseite: Hygienebezug Ubicare, blau
- Unterseite: rutschfester AntiSlip, grau
- verdeckter Zipp über 2 Seiten
- hochelastisch
- schwer entflammbar – Crip 5
- flüssigkeitsdicht
- Wasserdampfdurchlässigkeit: hohe Atmungsaktivität > 1800g/m² in 24h
- keimdicht gegen Bakterien, Viren und Pilze
- handelsübliche Wasch- und Wischdesinfektion



Format

- Matratze: 1980x870x150 mm
- Großer Keil: 800x320x140/1 mm
- Kleiner Keil: 550x280x110/1 mm

Optionen auf Anfrage

- individuelle Fertigung

Artikelnummer 3000008367

€ RL 93/42/EWG Klasse 1